

ALINCO

SOÜKAI KIBÜN COCO MCR7100 取扱説明書

〈ご使用前に必ずお読みください〉

この度は、「SOKAI KIBUN MCR7100」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品使用上の警告及び注意事項について記載しています。本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上、記載内容にしたがって正しくお使いください。又、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ箱と一緒に大切に保管してください。

●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

！ 警告・注意 安全のために、必ずお守りください。

警 告

- 本製品の使用は健康な方を対象としております。
次に該当する人は本製品を使用しないで下さい。
- 医師からマッサージを禁じられている人
(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈のう(瘤)、急性静脈(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。)症状を悪化させる恐れがあります。
- 医師の治療を受けている時や下記の人は必ず医師と相談の上使用する。

①ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型
医用電気機器を使用している人 ②悪性じゅよう(腫瘍)のある人
③心臓に障害のある人 ④妊娠中、出産直後の
⑤糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
⑥骨粗鬆症の人、捻挫、内臓炎などの急性とう(疼)痛性疾患の人
⑦かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
⑧体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん怠感、悪寒、
血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。)
⑨安静を必要とする人や軽く体調のすぐれないとき
⑩脚部に重度の血行障害のある人 ⑪上記以外に身体に特に以上
を感じているとき

上記を守らないと事故や体調不良を起こす恐れがあります。

- 本製品は必ず屋内もしくは車内で使用してください。
- 車中でご使用になられる場合、走行中は絶対に本製品をご使用しないで下さい。
- ローラーと本体のすき間にには絶対に手・足などを入れないでください。これが事故の恐れがあります。
- 使用時以外はアダプターをコンセント又はシガーライターソケットから抜き、保管場所は本製品でつまづかないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを施してください。
- 直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。変形や変色の原因になります。
- また、本製品を車内に放置しないで下さい。故障の原因になります。
- 本製品を水または他の液体に浸したりしないで下さい。また、お風呂場などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないで下さい。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 本製品の分解・改造は行わないで下さい。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 修理に際しましては、まず当社サービスセンターまでご相談ください。
- 専用アダプター以外は使用しないで下さい。火災や感電、故障の原因になります。

梱包をあけましたら、必ず各部品・付属品が揃っているかご確認ください。


注 意

- 現在健康でも、下記のような方は必ず医師と相談の上使用してください。
①加齢により筋肉の衰えた方や瘦せの方
②椎間板ヘルニアなど骨や内臓に起因する腰痛の方
③打ち身や捻挫のしやすい方
④乗り物酔いの激しい方
⑤過去に心臓や内臓の手術をされた方
⑥背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている人

上記を守らないと健康をそこなう恐れがあります。

- 本製品は一人で使う。2人以上でご使用にならないで下さい。これが事故の恐れがあります。
- 本製品の使用は1日15分までにして下さい。
- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雜音)が入りります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。
- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れを拭きとめてください。その後、シンナー系や酸系の強い洗剤での手洗いはお避けください。
- 湯気・湿気の多い場所や、室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にならないで下さい。正常に動作しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。
- コンセント又はシガーライターソケットからアダプターを抜き差しする時は、濡れた手で触ったり、コードを引っ張りたらないで、必ずアダプターをつかんでコンセント又はシガーソケットから抜いてください。(DC12V・車用アダプターをシガーライターソケットから抜く際は、指でソケット部を押さえながら徐々に抜いてください。)
- また、電源コードやプラグが傷んだり、アダプターの差込かゆるんだ状態のままでご使用しないで下さい。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 本製品をDC12V・車用アダプターでご使用になる場合には、ご使用前に必ず電源がDC12Vであるかご確認下さい。24V車などの指定電圧以外でのご使用は絶対にしないで下さい。
- DC12V・車用アダプターはシガーライターソケットの形状・寸法の特殊な車ではご使用できない場合があります。

〈各部の名称〉

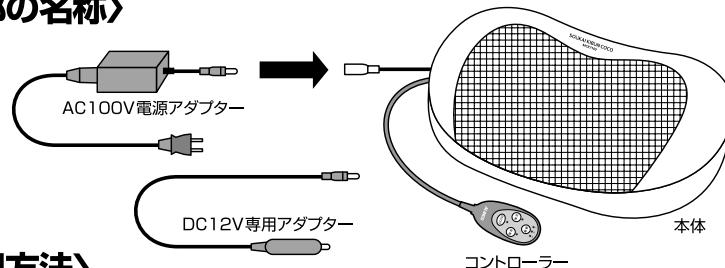

〈使用方法〉

- 1 〈プラグを差し込む〉
電源プラグをコンセント、またはシガーソケットに差し込みます。
- 2 〈電源を入れる〉
コントローラーの「ON/OFF」ボタンを押すと電源が入ります。
※この時点ではまだ動きません。
〈運転の中止〉
「ON/OFF」ボタンを押して停止させます。
- 3 〈スタート〉
「正転」「反転」のいずれかのボタンを押すと、図のような回転でマッサージを始めます。
※この時点で15分タイマーが作動します。
- 4 〈運転の調節〉
速度ボタンを押すごとに速度が変わります。
速度は速度ランプを目安にしてください。

〈注意〉

- 開始後15分経過すると自動タイマーが作動し、自動的に停止します。

また、正転・反転を切り替えるたびにタイマーはリセットされます。

- 同じ部位へ3分以上使用しないで下さい。身体へ必要以上に刺激を与え、逆効果となる恐れがあります。

- 品名 痛快気分CoCo
- 品番 MCR7100
- 電源 AC100V(50~60Hz)/21W
- 生産国 中国
- 製品サイズ W410×D260×H130(mm)
- 製品重量 2.5kg
- 付属品 シガーソケット×1個