

ALINCO

モミっくすキュッとリプロ

MCR4512

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、モミっくすキュッとリプロMCR4512をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

尚、本製品の連続使用時間は15分です。(連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。)

●無断の複製は固く禁じます。

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称
付属品

使用方法

使用例／
持ち運び方法

使用上の注意

お手入れ方法など

故障かな？と思う前に

警告・注意

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の注意及び警告内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。

表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、点検してください。

！ 警 告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

絵表示の意味



絶対におこなわないでください。



必ず指示に従い、おこなってください。

！ 注 意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。



分解をしないでください。



確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちにサービスセンターへお問い合わせください。

- また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

！ 警 告



- 本製品は一般家庭用・脚のマッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。また、脚マッサージ以外の目的では使用しないでください。
- 脚以外の部位へのマッサージには使用しないでください。また、直接骨部にあたる部位には使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 本製品は1人用です。2人以上でご使用にならないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 保護者の方は子供だけでの使用や、本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。また、動物等をお近づけにならないようご注意ください。
- カバーが外れたり、破れた状態では使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- ご使用前には必ず点検し、布カバーが破れていないか確認してください。どんな小さな破れでも直ちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜き、修理をご依頼下さい。布地が破れたままで使用するとケガや感電の恐れがあります。
- 本製品は体重90kg以下の人方が座って使用することを想定して作られています。体重が90kgを超える方や、装身具を身につけて90kgを超える方は使用しないでください。ご使用中、機器が破損する恐れがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 必ず椅子や床などに腰をかけた状態でご使用ください。機器の上に立ったり無理に体重をかけるご使用方法はおやめください。



- 他の治療器と同時に使用しないでください。気分が悪くなるなど体調不良を起こす恐れがあります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こす恐れがあります。
- ふくらはぎ用エアバッグ、脚挿入部のクッション材などが消耗した場合や破損した場合は、弊社サービスセンターまでご連絡ください。



- 本機の連続使用耐久時間は最高15分です。15分以上の連続作動はお止めください。また、ご使用後1時間はご使用にならないでください。故障の原因になります。



- 医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例 血栓【血塞】症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

●ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。

●悪性しゅよう（腫瘍）のある人。

●心臓に障害のある人。

●温度感觉喪失のある人。

●妊娠初期の不安定期又は出産直後の。

●糖尿病などによる高度な末梢（梢）循環障害からくる知覚障害のある人。

●皮膚に創傷のある人。

●安静を必要とする人。

●体温38℃以上（有熱期）の人。

例1 急性炎症症状【けん（倦）怠感、悪寒、血压変動など】の強い時期。

例2 衰弱しているとき。

●骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性【とう（疼）痛性】疾患の人。

●脚にケガをしている人。

●かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人。

●その他、医療機関で治療中の。

●上記以外に身体に異常を感じている人

- 使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがある、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。

- 身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。

警告・注意

⚠ 注意



- 本製品は必ず屋内でご使用ください。
- 使用前には、必ず本製品が平らな床に置かれているか、本体が十分安定しているかご確認ください。
- 日本国内で使用してください。
- ご使用前には、コントロールパネルが正常に作動するか確認してください。本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。
- アタッチメントやACアダプターは規定されたもの又は指定されたものを使用してください。



- ご使用の際には、必ず、振動から床面を保護する不燃性のマット等を敷いてください。床に損傷を与える恐れがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されると、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。



- 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くでの使用・保管はしないでください。
- ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。
- 毛足の長い絨毯などの上では使用しないでください。誤作動を起こす恐れがあります。

保管・お手入れについての警告・注意事項

⚠ 警告



- 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜き、保管場所は本製品でつまづかないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- お手入れの前には、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電の恐れがあります。

⚠ 注意



- 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再確認の上、ご使用ください。



- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。その際、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

電動機器の警告事項

— 本製品はAC100V電源を使用します —

⚠ 警告



- ご使用後は必ず「停止」ボタンを押して、すべてのマッサージを停止させてからACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ご使用にならない時や、雷が鳴り出した時には、本体メインスイッチを「OFF」にしてから、ACアダプターをコンセントから抜いてください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 停電の時には直ちにACアダプターをコンセントから抜き、本体メインスイッチを「OFF」に戻してください。
- ACアダプターは最後まで確実に差し込んでください。差し込みないと感電・ショート・発火の原因になります。



- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には設置しないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 室温が10°C以下・35°C以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。
- 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。故障や発火の原因になります。
- 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、お風呂場などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 本製品の上に足を置いたままで、ACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。



- コンセントからACアダプターを抜き差しする時には、絶対に濡れた手で触ったり、コードを引っ張ったりしないで、必ずACアダプター本体をつかんでコンセントから抜いてください。また、電源コードやプラグが傷んだり、差し込みがゆるんだ状態のままでのご使用はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。



- 製品を落下や冠水させて破損した場合、絶対に使用しないで当社サービスセンターにご連絡ください。



- 本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



- 本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、まず当社サービスセンターまでご相談ください。

- 電源コードが破損した場合には、当社サービスセンターまでご連絡ください。当社以外での修理は行わないでください。

- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社サービスセンター(フリーダイヤル0120-30-4515)までご相談ください。
- 使用しても効果が現れないときは、医師または専門家にご相談ください。
- お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊社サービスセンターまでご相談ください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の指導に従って処分してください。環境汚染の恐れがあります。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねことがあります。

安全のため必ず守っていただきこと
警告・注意事項

各部の名称 付属品

梱包をあけましたら、必ず付属品が揃っているかご確認ください。

■布カバーのお手入れ方法

布カバーが汚れた場合は、本体から取りはずし、ぬるま湯で洗濯してください。※色落ちする場合がありますので、他の物との洗濯はおさけください。

【布カバーの取りはずし方】

- 1.本体のACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 2.布カバーのファスナーを完全にはずし、本体から取りはずしてください。

【布カバーの取り付け方】

- 1.本体のACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 2.布カバーのファスナーを本体のファスナー取り付け部に差し込み、ファスナーを最後まで閉めてください。



※布カバーを取りはずした状態や破れた状態では使用しないでください。

※ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしないでください。

※当社指定の布カバー以外は使用しないでください。


■布カバーが破れたり、傷んできた時

布カバーは消耗品です。布カバーが破れた時は、必ず弊社サービスセンターにて専用布カバーをお求めください。(有償交換となります)


専用布カバーのお求めは、弊社サービスセンター(0120-30-4515)までお問い合わせください。

※ふくらはぎ用のアタッチメントを外して利用する場合、エアーブレーキャップをアタッチメント差込口に差し込んでご使用ください。

各部の名称
付属品

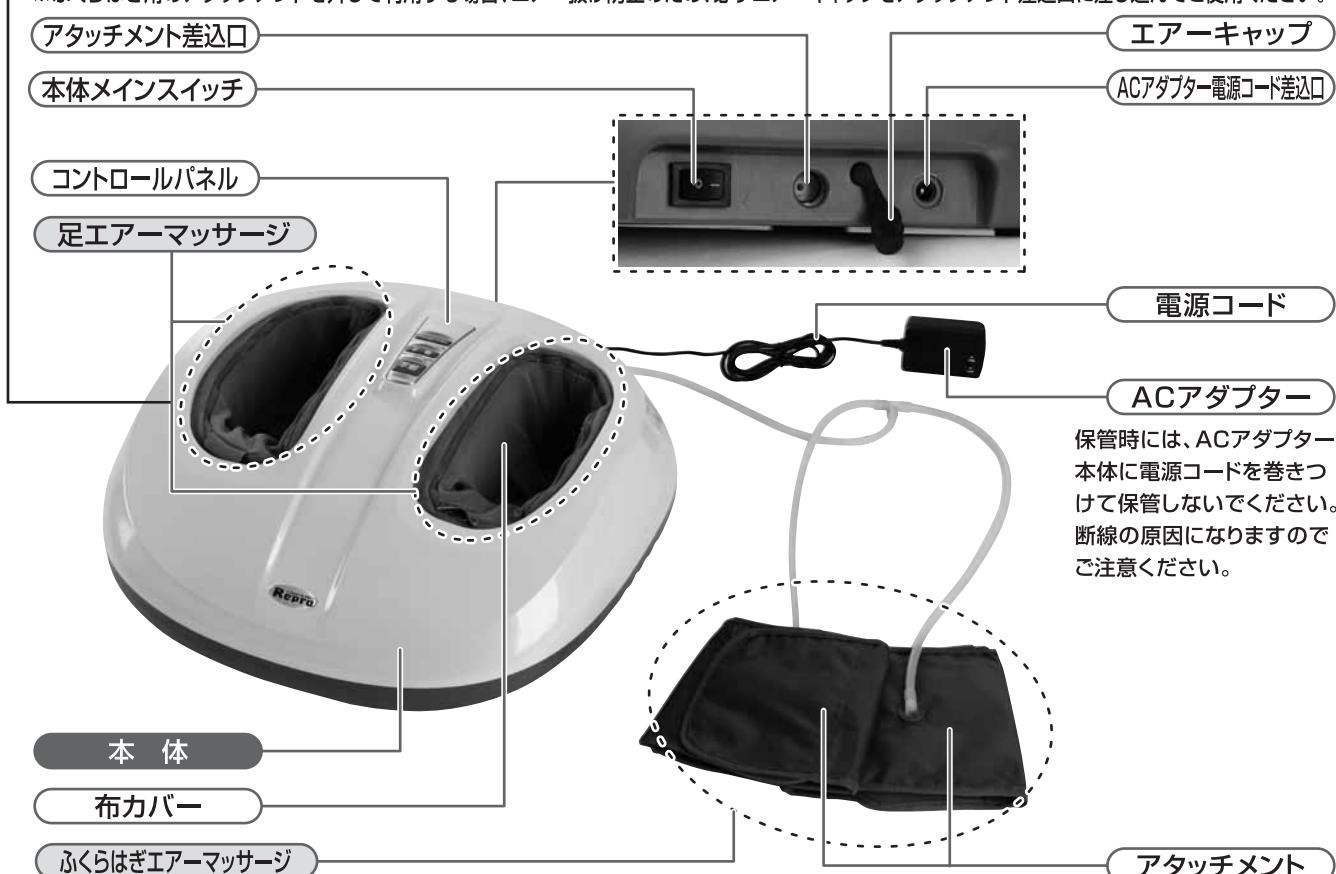

■コントロールパネル ボタン名称

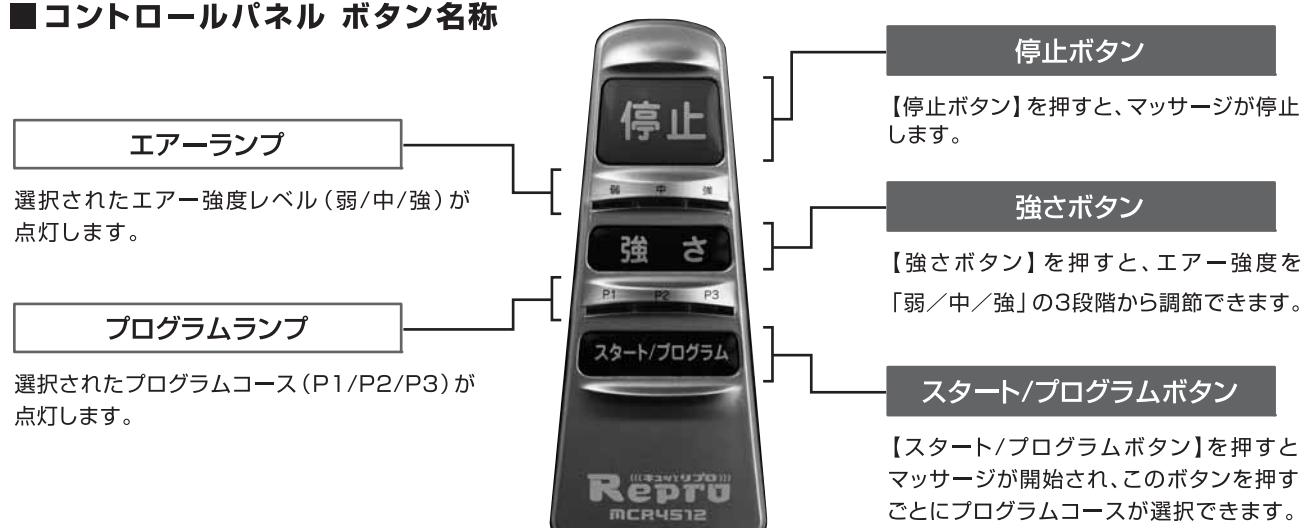


使用方法

■ 基本的な使用方法 (ご使用の前に、必ず次の項目の確認をしてください。)

- 使用前には、必ず本製品が平らな床に置かれているか、本体が十分安定しているかご確認ください。
- ご使用の際には、必ず床面を保護する不燃性のマット等を敷いてください。
- 必ずイスや床に腰掛けて使用してください。 ● 必ず足を入れてから作動させてください。


1 ACアダプターをコンセントに差し込みます

ふくらはぎ用のアタッチメントのホース部分をアタッチメント差込口に差し込みます。電源コードを本体に差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込みます。

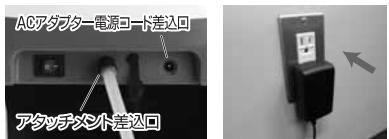


2 本体のメインスイッチをONにします

本体メインスイッチをONにします。

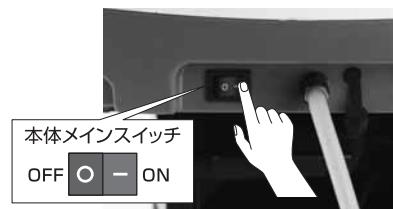

3 マッサージを開始します

【スタート／プログラムボタン】を押してプログラムを選択すれば、マッサージが開始されます。ボタンを押すごとにプログラムが変更されます。プログラムは、ランプが点灯しますので、そちらで確認ください。

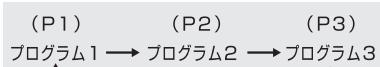

点灯 プログラムランプ



※この時点でタイマーが作動しています。


4 停止ボタンを押してマッサージを停止

【停止ボタン】を押すと途中でマッサージを停止することができます。ただし、使用中にOFFにした場合はエアーが完全に抜けるまで、約10秒はご使用になれません。



5 本体のメインスイッチをOFFにして終了

使用後は、ACアダプターをコンセントから抜いて下さい。

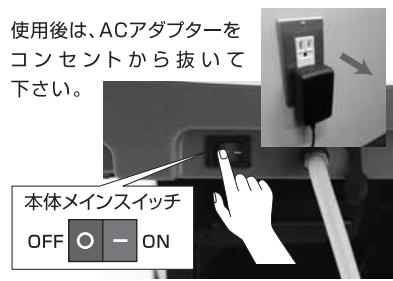

■ エアー強度の調節とプログラムコースについて

エアー お好みの締め付け具合でマッサージできます

【強さボタン】を押すごとに締め付け具合が弱／中／強の3段階で調節できます。



プログラム お好みのプログラムでマッサージできます

【スタート／プログラムボタン】を押すごとにプログラムコースが変ります。お好みのコースを選んでください。選択されたプログラムは、プログラムランプを目安にしてください。



【スタート／プログラムボタン】を押します

しっかり(P1) ⇒ しっかりした開放と圧迫を繰り返し、足とふくらはぎをもみあげます。

ゆったり(P2) ⇒ ゆったりとした動きで段階的に締め付け、足とふくらはぎをほぐします。

やすらぎ(P3) ⇒ 足とふくらはぎをやさしく低圧(75%)で保持してほぐします。

！ 注意

- 床を傷つけないように、必ず床面を保護する不燃性のマット等を敷いてください。
- 開始後15分経過すると自動タイマーが作動し、自動的にマッサージが終了します。連続使用はおやめください。
- マッサージは15分以上しないでください。身体へ必要以上の刺激を与え、逆効果となる恐れがあります。
- 無理な力がかかると安全装置が作動して、マッサージを終了し全てのランプが点滅します。その場合は、メインスイッチをOFFにしてもう一度ONにしてください。

使用例／持ち運び方法

■ 使用例

(必ず椅子や床に腰掛けで使用し、絶対に製品の上に立たないでください。)

- ① 椅子に座り、本体の中に足を入れてください。



- ② 体を楽にして椅子に腰掛け、足を90度に曲げてからご使用ください。



▲ 注意

- 足以外の部位へのマッサージには使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。

- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- カバーが外れたり、破れた状態では使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。

- 下からの突起物やエアーに無理に抵抗するような使用方法はおやめください。
- 機器の上に立ったり、無理に体重をかけるご使用方法はおやめください。
- 直接骨部にあたる部分へは使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。

■ 持ち運び方法

- 商品を持つときは必ず持ち手を持ってください。



■ アタッチメントの取り付け方法

ふくらはぎ用のアタッチメントのホース部分をアタッチメント差込口に差し込みます。

① ふくらはぎ用のアタッチメントを装着する

- アタッチメントをふくらはぎに当ててください。



② 面ファスナーでしっかり固定する

- はがれないように手でしっかりと押さえて固定してください。



ふくらはぎ用のアタッチメントを強く締め付けるとマッサージ力が高まり、弱く締め付けるとマッサージ力が弱まりますので、アタッチメントでも負荷の調節が可能です。

※リラックスした姿勢でお使いください。

※ご使用中は立たないでください。破損の原因になりますので、必ず腰掛けた状態でご使用ください。

※初めは「弱」で使い、慣れてから「強」をお使いください。

※ご使用は1日15分以内にしてください。


■ 本体のエアーマッサージだけを利用する場合

ふくらはぎ用のアタッチメントのホース部分をアタッチメント差込口から取り外します。

- ① ふくらはぎ用のアタッチメントのホース部分をアタッチメント差込口から取り外します。



- ② アタッチメント差込口にエアーバルブを差し込んでください。

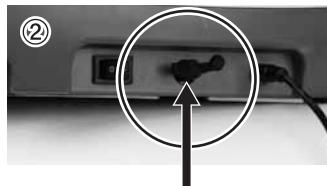

▲ 注意

- ふくらはぎ用のアタッチメントを使わず、本体のエアーマッサージのみをお使いの場合は、必ずアタッチメント差込口にエアーバルブを差し込んでください。

使用上の注意

★痛みを我慢して続けるマッサージはお止めください。

- 人により必要なマッサージの時間・強度は異なります。
- 痛みを我慢して続けるマッサージは効果が無いばかりか筋肉痛や皮膚を痛めるなど逆効果にもなります。
- 痛みを少しでも感じた場合には、すぐに使用を中止してください。

【ふくらはぎ用のアタッチメントを外してご利用する場合のご注意】

ふくらはぎ用のアタッチメントを外して利用する場合、エアー抜け防止のため、必ずエーキャップをアタッチメント差込口に差し込んでご使用ください。エーキャップを差し込まないと正しく加圧されません。

【ACアダプター保管時のご注意】

保管時には、ACアダプター本体に電源コードを巻きつけて保管しないでください。断線の原因になりますのでご注意ください。



△ 注意

- 足に装飾品など硬いものをつけた状態で使用しないでください。ケガや事故の恐れがあります。
- 直接骨部にあたる部位には使用しないでください。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はお止めください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品は1人用です。2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故の恐れがあります。

お手入れ方法など

■お手入れ方法（本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。）

- お手入れの前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長期にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。
また、汚れ等が落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。この時、シンナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れはお止めください。シミや変形の原因になります。



■保管および廃棄について

- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 温度、湿度の高いところや、直射日光の当たるところに置かないでください。
- 廃棄は必ず各自治体の取り決めに従ってください。

故障かな？と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症 状	チェック箇所
●動かない	→ ○ ACアダプターがコンセントに差し込まれていますか? ○ 長時間の使用で本体が熱くなっていますか? (1時間程度時間をおいて本体内部の温度を下げてから使用してください。)
●停止する	→ ○ 開始後15分経過していませんか?オートオフ機能が作動しています。
●エアーの膨らみが弱い ●エアーが抜ける音がする	→ ○ ふくらはぎ用アタッチメントのホースまたは、エーキャップがアタッチメント差込口にしっかり差し込まれていますか?

※確認後なお、異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず下記のサービスセンターに相談ください。

お問い合わせは サービスセンター ☎ 0120-30-4515 (AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)まで

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは当社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については本保証は適用されません。
 - 説明以外の誤操作、取扱上の不注意
 - 天災、火災、地震等による故障
 - 砂・泥・水かぶり等が原因で生じた故障
 - お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
 - 保存上の不備
 - 当社規定の修理取扱所以外で行われた修理等による故障
 - 本製品本来の使用目的以外の使用
 - 日本国外でご使用の場合
 - 本保証書の添付のない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。
但し、本保証書は製品と一緒に梱包されており、販売店印がもらえない事があります。
その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

ご購入店名	(印)	おなまえ	
ご購入年月日		おところ	〒
		電話番号	() -

※お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

アルインコ株式会社

フィットネス事業部

大阪府高槻市三島江1-1-1

■ 製品仕様

管理医療機器

一般的名称：家庭用エアーマッサージ器

販 売 名：モミっくすキュッとリプロ

認 証 番 号：224AKBZX00100000

製造販売業者：アルインコ株式会社

住 所：大阪府高槻市三島江1-1-1

生 産 国：中国

製品サイズ：W 486 × D 444 × H 191 (mm)

製 品 重 量：約 4.5kg

定 格 電 圧：AC100V (50/60Hz)

定格消費電力：20W

定 格 時 間：15分

主 な 材 質：本体／ABS、 生地／ポリエステル

修理・
アフターサービス の
ご案内

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社サービスセンターまでお問合せください。
なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。
詳しくは、弊社サービスセンターまでお問合せください。

 **アルインコ株式会社**
サービスセンター

フリーダイヤル  0120-30-4515
(AM10:00~PM4:00 但しPM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)
上記以外受付FAX:072-678-6410