

ALINCO

フットリラ MCR7814

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、フットリラ「MCR7814」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書は、本製品の設置と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

尚、本製品の連続使用時間は20分までとなります。（連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。）

●無断の複製は固く禁じます。

疲労回復

血行促進

筋肉のコリ・
疲れをほぐす

神経痛・
筋肉痛の緩和

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の注意及び警告内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。
表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、点検してください。

警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

絵表示の意味



絶対におこなわないでください。



分解をしないでください。



必ず指示に従い、おこなってください。



確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちにサービスセンターへお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

警告



- 本製品は一般家庭用・足のマッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。また、足マッサージ以外の目的では使用しないでください。
- 本製品は1人用です。2人以上でご使用にならないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 保護者の方は子供だけの使用や、本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。また、動物等をお近づけないようご注意ください。
- 熱湯は使用しないでください。火傷や故障の恐れがあります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品は体重90kg以下の人が座って使用することを想定して作られています。体重が90kgを超える方や、装身具を身につけて90kgを超える方は使用しないでください。ご使用中、機器が破損する恐れがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。気分が悪くなるなど体調不良を起こす恐れがあります。



- 1回のご使用時間を20分以内にしてください。連続使用しないでください。連続して使用しますと、過負荷保護装置により自動停止する場合がございます。その場合はスイッチを切り60分ほどお待ちください。(室温等により時間は変わります。)



- 医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例 血栓【血塞】症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など。



- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
- 心臓に障害のある人。
- 温度感覚喪失のある人。
- 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人。
- 皮膚に創傷のある人。
- 安静を必要とする人。
- 体温38℃以上(有熱期)の人。

例1 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。

例2 衰弱しているとき。

- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の人。
- 脚にケガをしている人。
- かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人。
- その他、医療機関で治療中の人。
- 上記以外に身体に異常を感じている人。

- 使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じた時は直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。
- 使用しても、効果が現れない場合は、医師または専門家に相談してください。



- 身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。

- 本製品の浴槽内部には、お湯を冷めにくくする為のヒーターがついています。ヒーター機能作動時には浴槽内部に熱を持ちますので、温度に対して感覚の鈍い方は、十分注意を払ってください。

警告・注意

⚠ 注意

- 本製品は必ず屋内でご使用ください。
- 本製品は必ず水平な場所で使用してください。気泡が正しく出ないなど、誤作動をまねく恐れがあります。
- 日本国内で使用してください。
- ご使用の際には、必ず、振動から床面を保護する不燃性のマット等を敷いてください。床に損傷を与える恐れがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。

- 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くでの使用・保管はしないでください。
- ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。
- 本製品は必ずイスに腰掛けて使用し、絶対に製品の上に立たないでください。
- 毛足の長い絨毯などの上では使用しないでください。誤作動を起こす恐れがあります。
- 本製品の材質(ポリプロピレン)を劣化させる、または気泡噴出穴が詰まる恐れのある溶剤や薬品等は使用しないでください。変形や変色、故障の原因になります。

- OK? ● 本製品はお湯の中に入れて使用しますので、床や周囲が濡れる恐れがあります。電気製品や濡れてはいけない物などが周囲にないかどうか確認してください。
- ご使用前には、操作スイッチ、タイマーなどが正常に作動するか確認してください。本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。

保管・お手入れについての警告・注意事項

⚠ 警告

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜き、保管場所は本製品でつまつかないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- お手入れの前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の恐れがあります。
- しばらく使用しなかった機器を使用する時は、操作スイッチ、電源コードなど、また機器が正常に、かつ安全に作動するか確認してください。

⚠ 注意

- 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再確認の上、ご使用ください。
- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的な汚れ等を拭きとってください。その際、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

電動機器の警告事項

—— 本製品はAC100V電源を使用します ——

⚠ 警告

- ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ご使用にならない時や、雷が鳴り出したときには、プラグをコンセントから抜いてください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 停電の時には直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には設置しないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。
- 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。故障や発火の原因になります。
- 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、お風呂場などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 本製品の中に足を入れたままで、電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。感電・漏電の原因になります。

- コンセントから電源プラグを抜き差しするときには、絶対に濡れた手で触ったり、コードを引っ張ったりしないで、必ずプラグをつかんでコンセントから抜いてください。また、電源コードやプラグが傷んだり、プラグの差し込みがゆるんだ状態のままのご使用はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 製品を落下や冠水させて破損した場合、絶対に使用しないで当社サービスセンターにご連絡ください。
- 本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、まず当社サービスセンターまでご相談ください。
- 電源コードが破損した場合には、当社サービスセンターまでご連絡ください。当社以外での修理は行わないでください。
- 機器が故障した場合にはお買い上げの販売店または当社に相談ください。修理は危険ですからおやめください。

- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社サービスセンター(フリーダイヤル0120-30-4515)までご相談ください。
- お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊社サービスセンターまでご相談ください。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いいたします。紛失された場合、再発行はお受けしかねる場合があります。

各部の名称・機能説明

梱包をあけましたら、使用する前に必ず各付属品が揃っているかご確認ください。

操作スイッチ

スイッチを押すと、マッサージを開始します。
もう一度、スイッチを押すと停止します。


▲ 注意

操作スイッチ上には、故意に水をかけないでください。故障の原因になります。

足裏アタッチメント

ローラー、ポイント、角質取りの3種類のアタッチメントを付属しています。

水位目安線

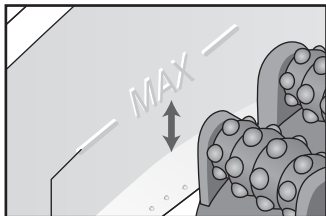

水位目安

▲ 注意

この線以上には絶対に水を入れないでください。

振動マッサージ

血行を促進させる振動は、マッサージ効果が高く冷え性の方にも最適です。

排水口

▲ 注意

排水口以外から水・お湯を捨てないでください。操作スイッチ上などから本機内部に水が入る可能性があります。また、水を捨てる時は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

※詳しくは下記【排水方法について】をご確認ください。

保温アシスト機能

お湯の温度を冷めにくくします。

※あくまでも“お湯を冷めにくくする”もので、“お湯の温度を一定に保つ”機能ではありません。

気泡穴

細かい気泡が指の間や足の裏へすみずみに届いて疲れや汚れを落とします。

※本機を水平にしないと均一に気泡が出ません。

アタッチメントホルダー

使わないアタッチメントを本体サイドのホルダーに収納することができます。


電源プラグ

▲ 注意

本製品は自動タイマーを内蔵しています。お使いになられてから20分後に自動停止します。1回のご使用時間を20分以内にしてください。連続使用しないでください。連続して使用しますと、過負荷保護装置により自動停止する場合がございます。その場合はスイッチを切り60分ほどお待ちください。(室温等により時間は変わります。)

■ 足裏アタッチメントについて

ローラー、ポイント、角質取りの3種類のアタッチメントが付属しています。目的にあわせてアタッチメントを選べば、快適なフットケアが行えます。

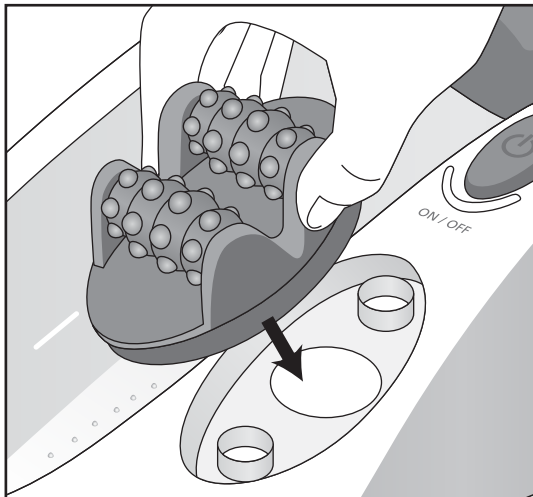

付属品は本機器付属のものをご使用してください。

■ 排水方法について

排水口は、本体の前面に設置されています。この場所以外から排水した場合、構造上、水漏れが発生する可能性があります。排水の際は、必ず決められた場所より排水してください。

■ 正しい排水方法




排水の際は、本体に水が掛からないよう、排水口からゆっくりお湯(水)を捨ててください。

■ 間違った排水方法




排水口以外から、お湯(水)は捨てないでください。

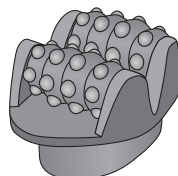


マッサージローラー

ローラーが回転し、足裏を心地よい刺激します。

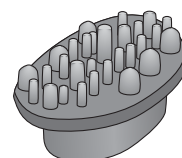

ポイントマッサージ

大小のポイントが足裏のツボを刺激します。

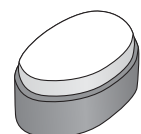

角質取り

かかとなどの角質を取り除きます。

ご使用方法

■ご使用の前に、必ず次の項目の確認をしてください。

1. ご使用の際には、必ず振動から床面を保護する不燃性のマット等を敷きます。
2. イスと足拭き用のタオルを用意します。
3. 本製品をイスの前に置き、実際に腰掛けた状態で位置を決めます。
4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
5. 水または適温のお湯を本製品内側の「水位目安」まで注ぎ入れます。

※お湯を注ぐ際には内側浴槽以外、特に操作スイッチ上にかからないよう、ご注意ください。

※入浴の際に適温といわれている42度前後のお湯を入れてください。

本製品の「保温アシスト機能」はあくまでも“お湯を冷めにくくする”もので、“お湯の温度を一定に保つ”機能ではありません。



■ご使用方法

1. 操作スイッチを押してマッサージを開始します。
2. 足裏アタッチメントでお好みの足ケアが行えます。
目的に合わせたアタッチメントをお選びください。
3. 停止後は、必ず電源プラグを抜いてください。
4. 使用した水またはお湯を捨てる時は、他の部分が濡れないように注意し、排水口からゆっくりと捨ててください。

※1回のご使用で連続して20分以上ご使用にならないでください。(内蔵タイマーで20分後に自動停止します。)

※足裏アタッチメントをお使いの際、激しく足を動かされると、水またはお湯が外にこぼれる恐れがあります。水面の状態を見ながらゆっくりにおこなってください。またこの時、足に力を入れ過ぎないでください。本体に負担がかかり、故障の恐れがあります。

※お風呂場などの湯気・湿気が多い場所でのご使用はお止めください。

お手入れ方法

- ご使用後は水またはお湯を捨てた状態で操作スイッチを押して、本体を始動させ、空気を出して中に残った水を完全に出してください。その後、水気を拭き取り、しばらくおいて良く乾かしてください。
- 浴剤等を使用した場合は、一度きれいな水に入れ替え、操作スイッチを押して本体を始動させ、数分作動させその後、通常通り水を完全に出し、水気を拭き取り、良く乾かしてください。
(気泡の穴が詰まる恐れがある浴剤の使用はお止めください。使用可能な浴剤でも入れすぎにご注意ください。)
- 足裏アタッチメントは取り外し可能です。本製品を長期にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。また、汚れ等が落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。この時、本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。(シンナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れはお止めください。シミや変形の原因になります。)
- 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように洗浄していただき、湿気の少ないところに整理・保管してください。
- 地球環境保護のため、廃棄する場合はそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症状	チェック箇所
●気泡が出ない、出にくい	→ ○ 水または適温のお湯を水位目安線より多く入れていませんか? ○ 床面が水平な場所で使用されていますか?
●動かない	→ ○ 電源プラグにコンセントが差し込まれていますか? ○ 自動タイマー停止後、すぐに使用されていませんか?

お問い合わせは サービスセンター ☎ 0120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)まで

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生したときは保証規約により無償修理をいたします。

保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは当社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については本保証は適用されません。
 - 説明以外の誤操作、取扱上の不注意
 - 天災、火災、地震等による故障
 - 砂・泥・水かぶり等が原因で生じた故障
 - お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
 - 保存上の不備
 - 当社規定の修理取扱所以外で行われた修理等による故障
 - 本製品本来の使用目的以外の使用
 - 日本国外でご使用の場合
 - 本保証書の添付のない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間（1年間）が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。

- 本保証書は、下記事項を必ずご記入の上、ご利用ください。ご記入なき場合は無効となります。
- ※本保証書は、製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえない事があります。その際はレシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

ご購入店名	おなまえ	
		〒
①	おところ	
ご購入年月日	電話番号	() -

※お客様にご記入いただいた保証書（個人情報）は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江1-1-1

■製品仕様

管理医療機器

一般的名称：家庭用電気マッサージ器

製品サイズ：幅 348 × 奥行 409 × 高さ 185 (mm)

販売名：フットリラ

製品重量：約 2.0kg

認証番号：222AKBZX00095A02

定格電圧：AC100V (50/60Hz)

製造販売業者：アルインコ株式会社

定格消費電力：48W (電熱装置 38W)

住所：大阪府高槻市三島江1-1-1

定格時間：20分

生産国：中国

主な材質：ポリプロピレン

修理・
アフターサービスの
ご案内

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社サービスセンターまでお問合せください。

なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。

詳しくは、弊社サービスセンターまでお問合せください。

 **アルインコ株式会社**

サービスセンター

フリーダイヤル  **0120-30-4515**

(AM10:00~PM4:00 但しPM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)

上記以外受付FAX:0726-78-6410