

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。
 - 取扱説明書記載以外の誤操作、取扱上の不注意
 - 天災、火災、地震などによる外部要因による故障及び損傷
 - 砂、泥、水かぶりなどが原因で生じた故障
 - お買い上げ後のお客様による輸送、移動、落下など
 - 保管上の不備
 - 弊社既定の修理取扱所以外で行われた修理などによる故障
 - 本製品本来の使用目的以外の使用
 - 学校・スポーツジム・業務用などの不特定多数による使用
 - 日本国外でのご使用の場合
 - 本保証書をご提示いただけない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

ご購入店名	おなまえ	
	おところ	〒
ご購入年月日	電話番号	() -

※お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理、サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江1-1-1

修理・アフターサービスのご案内

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。詳しくは、弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

アルインコ株式会社
フィットネス事業部 カスタマーサービス課
フリーダイヤル **0120-30-4515**
(AM10:00~PM4:00 但しPM12:00~1:00及び土日・祝祭日を除く)

※故障や異常が発生した場合、まずは「故障かな?と思う前に」をご確認ください。

左記以外受付
FAX: 072-678-6410
E-mail: fitness@alinco.co.jp
FAX又はメールでのお問い合わせの場合、回答に時間を要する場合がございます。予めご了承ください。

EXG2216:この商品のWEBページはこちら



ALINCO

美容ローラー エステタッチモア EXG2216

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

- この度は、美容ローラー エステタッチモア「EXG2216」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書は、本製品使用上の警告及び注意事項について記載しております。
- 本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上、記載内容にしたがって正しくお使いください。
- お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ箱と一緒に大切に保管してください。
- 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

安全にご使用していただくために、必ずお守りください。

警告・注意

- 本製品は、一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本製品は医療用・治療用の器具ではございません。
- 本製品の使用は健康な方を対象としております。次に該当する人は本製品を使用しないで下さい。
- 医師から使用を禁じられている人
血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など。
症状を悪化させる恐れがあります。
- 医師の治療を受けている時や下記の人は必ず医師と相談の上使用する。
 - ①ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医療用電気機器を使用している人
 - ②悪性しゅよう(腫瘍)のある人
 - ③心臓に障害のある人
 - ④妊娠中、出産直後の人
 - ⑤糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - ⑥骨粗しょう症の人、捻挫、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の人
 - ⑦かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
 - ⑧体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき。)
 - ⑨安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
 - ⑩皮膚に創傷のある人
 - ⑪上記以外に身体に特に異常を感じているとき上記を守らないと事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- 現在健康でも、下記のような方は必ず医師と相談の上使用してください。
 - ①加齢により筋肉の衰えた方や痩身の方
 - ②椎間板ヘルニアなど骨や内臓に起因する腰痛の方
 - ③打ち身や捻挫のしやすい方
 - ④乗り物酔いの激しい方
 - ⑤過去に心臓や内臓の手術をされた方上記を守らないと健康をそこなう恐れがあります。

- 次のようなときには使用しないでください。疲労が激しいとき。お酒に酔っているとき。湿疹ができていたり、体調不良や事故の原因になります。
- 食後の1時間は使用しないでください。体調不良の原因になります。
- 他の治療器などと同時に使用しないでください。体調不良や事故の原因になります。
- 直接骨部にあたる部位や、髪の毛など巻き込み恐れがある部位には絶対に使用しないでください。けがや事故の原因になります。
- 駆動部と本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 強く押し付けて使用しないでください。皮膚や筋肉を傷める原因になります。
- 強すぎる回転は筋肉や身体を痛めますので、ご自身に合った強さでご使用ください。
- 本製品の使用は1回 5分 までにしてください。また、一箇所への連続使用は1分以内にしてください。使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止してください。
- 5分 以上の連続使用はお止めください。また、使用後1時間は、機械を休ませてください。
- 本製品は必ず屋内で使用してください。
- 日本国内で使用してください。
- ストーブなどの火気の近くで使用したり、タバコを吸いながら使用しないでください。火災の恐れがあります。
- 布団の中やこたつの中での使用はお止めください。

- 車などの運転中は絶対に使用しないでください。
- 使用中は眠らないでください。事故やケガの恐れがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。
- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音身にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。

【専用ACアダプターに関する警告・注意】

- ACアダプターは付属の専用アダプター以外を使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ACアダプターでの使用時は、本体回転部にACアダプターのコードを巻き込まないように注意してください。
- ACアダプターでの使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ご使用にならない時や、雷が鳴り出した時には、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- コンセントからACアダプターを抜き差しする時には、濡れた手で触ったり、コードを引っ張ったりしないで、必ずACアダプターをつかんでコンセントから抜いてください。また、電源コードやプラグが傷んだり、アダプターの差込がゆるんだ状態のままでの使用はしないでください。故障や、漏電・発火の原因になります。
- 使用中及び保管の際には、ACアダプターのコードの上に重量物が載らないようにご注意ください。断線や短絡・発火の原因になります。
- 保管の際、ACアダプターのコードを、ACアダプター本体や製品本体に強く巻きつけたりしないでください。断線や短絡・発火の原因になります。

- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れを拭きとってください。その際、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。
- 直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。変形や変色の原因になります。
- 保護者の方は子供だけの使用や、本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。また、動物等をお近づけないようご注意ください。
- 保管場所は本製品でつまずかれないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを施してください。
- 本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、まず弊社カスタマーサービス課までご相談ください。
- 製品を落下や冠水させて破損した場合、絶対に使用しないで弊社カスタマーサービス課(フリーダイヤル0120-30-4515)にご連絡ください。
- 本製品を廃棄する際は、地域で定める条例に従って廃棄してください。

各部の名称・付属品 / ご使用準備・操作方法 / お手入れ方法 / 故障かな?と思う前に

各部の名称・付属品




製品仕様

品名	美容ローラー エステタッチ モア
品番	EXG2216
本体サイズ	W 195 × D 81 × H 145 mm (本体のみ。アタッチメント・ACアダプター含まず。)
質量(重量)	約 710 g (本体のみ。アタッチメント・ACアダプター含まず。)
電源	専用ACアダプター (入力: AC100V (50/60Hz) / 出力: DC12V)
消費電力	5.5 W
定格時間	5分
回転数	低速回転: 約1,250 rpm / 高速回転: 約1,510 rpm
材質	本体: ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂) アタッチメント: ナイロン、シリコン
生産国	中国


ご使用準備・操作方法

1. 本体に付属のアタッチメントを取り付けます。
(アタッチメントは、[ボディ用アタッチメント]と[フェイス用アタッチメント]の2種類が付属されています)
⚠️ 注意 使用中にはずれないように、しっかりと差し込んでください。
2. 本体の[ACアダプター差込口]に、専用ACアダプターのプラグを差し込み、専用ACアダプター本体をコンセントに差し込みます。
⚠️ 注意 専用ACアダプターのコードが本体回転部に巻き込まれないようご注意ください。

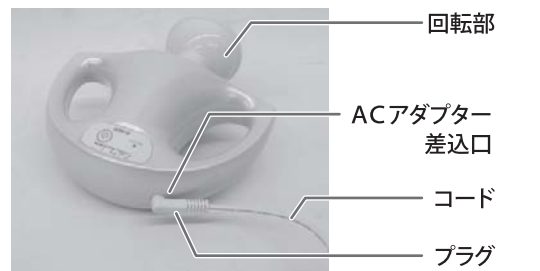

⚠️ 警告 専用ACアダプター以外は差し込まないでください。故障や漏電・発火の原因になります。

3. 操作ボタンで、「開始」「回転速度切替」「停止」の操作を行います。

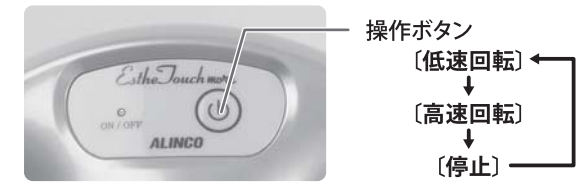

⚠️ 注意 慣れるまでは(低速回転)で使用してください。

4. 右ページの「部位ごとの使用方法」に従って、体の各部位に当てます。

⚠️ 注意 強すぎる刺激は逆効果です。一部位1分以内、全身で合計5分以内を守って使用してください。

5. 操作ボタンまたは、内蔵タイマー(5分)で停止します。使用後は、コンセントから専用ACアダプターを抜いてください。

⚠️ 警告 保管の際、専用ACアダプターのコードを本体などに強く巻き付けたりしないでください。断線やショート・発火の原因になります。

お手入れ方法

- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的にお手入れしてください。
⚠️ 警告 お手入れの際には、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。思わぬ事故の原因になります。
- 本体や付属のアタッチメントの汚れは、乾いた柔らかい布で拭きとってください。汚れが落ちない場合は、中性洗剤の薄め液を柔らかい布につけて、拭きとってください。
⚠️ 警告 本製品に防水機能はありません。水や液体にはつけたりしないでください。故障や漏電・発火の原因になります。
⚠️ 注意 各部に樹脂を使用していますので、シンナー系や酸系の強い洗剤は使用しないでください。変色・変質の原因になります。
- アタッチメントは消耗品です。傷んだアタッチメントは使用しないでください。新しいアタッチメントのご購入は、弊社代理店または、弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

故障かな?と思う前に

- 使用中のモーター作動音について
構造上、回転に負荷がかかるとモーターの作動音が高くなりますが、異常ではございません。
- 専用ACアダプターの保護機能について (使用中の作動停止)
使用中、本体回転部がロックするほどの負荷がかかった場合、ACアダプター内部の保護装置によって電源が数秒間、自動カットされますが、異常ではございません。

部位ごとの使用方法

■肌の確認

初めて使用される方は、肌への影響を確認してからご使用ください。
【確認方法】
この腕の内側に軽く当て、低速回転で1分間使用してください。使用後および翌日に赤身やほてりなどの肌への異常がないことをご確認ください。お試し中に異常を感じられたら使用を中止してください。

■二の腕周り



肘から脇にかけて軽く押し当てます。

■背中周り



腰から肩甲骨にかけて軽く押し当てます。

■お腹・ウエストまわり



円を描くように、お腹に押し当てます。

■太もも周り



足首から内ももの付け根まで足のラインに沿って、ゆっくりと押し当てます。外側も同様に、足首からももの付け根付近までゆっくりと押し当てていきます。

■フェイス



お手持ちのジェルなどを塗ったお肌へ、輪郭に沿うように当てていきます。

⚠️ 警告
回転部に巻き込まれないよう、ご使用前にご確認ください。
● 髪の毛を巻き込まないように、短く束ねてください。
● ネックレスやピアスなどの装飾品は外してください。
● 衣服の上から使用しないでください。
● その他、回転部に巻き込むようなものが周囲にないかご確認ください。

■使用上の注意

- お好みの回転速度(低速回転/高速回転)を選んでご使用ください。
- 必要以上に強く押し付けて使用しないでください。
- 一部位1分以内、全身で5分以内を守ってください。過度な使用は肌を傷めます。
- 5分以上の連続使用はおやめください。また、使用後1時間は機械を休ませてください。
- 肌が弱い人は、使用時間を短くしてください。それでも、肌に合わない人は使用を中止してください。
- 体毛が長い方や髪の毛の付近では、絡まるおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
- 衣服の上から使用しないでください。回転による衣服(生地)と肌の摩擦により、肌を傷めたり衣服やアタッチメントを傷めます。
- 指定された部位以外には使用しないでください。
- 心臓の上には使用しないでください。
- 骨のすぐ上(くるぶし、ひざ、ひじなど)や、へそへの使用は避けてください。
- 防水機能はありません。浴室の中では使用しないでください。
- 本体を振り回さないでください。アタッチメントがはずれてケガをするおそれがあります。
- 髪の毛など、回転部に巻き込まないようご注意ください。髪の毛の長い方は短く束ねるなどしてください。
- ACアダプターのコードが引っ張られたり、無理に曲げられてしまうような使い方はしないでください。
- アタッチメントは消耗品です。傷んだアタッチメントは使用しないでください。