

ALINCO

品名

モミっくすキュッとラボ

型式

MCR4617

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

● 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、モミっくすキュッとラボ「MCR4617」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要なときにいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

なお、本製品の連続使用時間は15分です。(連続使用後、約1時間は本製品を休ませてください。)

● 無断の複製は固く禁じます。

INDEX

安全のため
必ず守っていただくこと

警告・注意事項

各部の名称

使用方法

使用例／
持ち運び方法

使用上の注意
お手入れ方法など
故障かな?と思う前に

警告・注意

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の注意及び警告内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、点検してください。

警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損するおそれのあることを示します。
・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

絵表示の意味



絶対におこなわないでください。



分解をしないでください。



必ず指示に従い、おこなってください。



確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載している内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

警告



- 本製品は一般家庭用・脚のマッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。また、脚マッサージ以外の目的では使用しないでください。
- 脚以外の部位へのマッサージには使用しないでください。また、直接骨部にあたる部位には使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。
- 本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故のおそれがあります。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。けがや事故のおそれがあります。
- お子様には使用させないでください。
- 保護者の方は、本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。また、動物などをお近づけないようご注意ください。
- カバーが外れたり、破れた状態では使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。
- ご使用前には必ず布カバーの布地が破れていないか確認してください。どんな小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理をご依頼下さい。布地が破れたままで使用するとケガや感電のおそれがあります。
- 本製品は体重90kg以下の人が座って使用することを想定して作られています。体重が90kgを超える方や、装身具を身につけて90kgを超える方は使用しないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。



- 必ず椅子や床などに腰をかけた状態でご使用ください。機器の上に立ったり無理に体重をかけるご使用方法はお止めください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。気分が悪くなるなど体調不良を起こすおそれがあります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こすおそれがあります。



- 本機の連続使用耐久時間は最高15分です。15分以上の連続作動はお止めください。また、ご使用後1時間はご使用にならないでください。故障の原因になります。



- マッサージは15分以上使用しないでください。身体へ必要以上の刺激を与え、逆効果となるおそれがあります。
- 医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。
例 血栓[血塞]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
- 心臓に障害のある人。
- 温度感覚喪失のある人。
- 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人。
- 皮膚に創傷のある人。
- 安静を必要とする人。
- 体温38℃以上(有熱期)の人。
例1 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
例2 衰弱しているとき。
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の人。
- 脚にケガをしている人。
- かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人。
- その他、医療機関で治療中の人。
- 上記以外に身体に異常を感じている人。

警告・注意



- 使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。
- 身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。

注意



- 本製品は必ず屋内でご使用ください。
- ご使用前には、必ず本製品が平らな床に置かれているか、本体が十分安定しているかを確認ください。
- 日本国内で使用してください。
- ご使用前には、コントロールパネルが正常に作動するか確認してください。本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。



- ご使用の際には、必ず、振動から床面を保護するマットなどを敷いてください。床に損傷を与えるおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。



- 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くでの使用・保管はしないでください。
- ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。
- 本製品は必ずイスや床に腰掛けて使用し、絶対に製品の上に立たないでください。
- 毛足の長い絨毯などの上では使用しないでください。誤作動を起こすおそれがあります。



- 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くでの使用・保管はしないでください。
- ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。
- 本製品は必ずイスや床に腰掛けて使用し、絶対に製品の上に立たないでください。
- 毛足の長い絨毯などの上では使用しないでください。誤作動を起こすおそれがあります。

保管・お手入れについての警告・注意事項

警告



- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜き、保管場所は本製品でつまずかれないような場所に置き、特にお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- お手入れの前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電のおそれがあります。

注意



- 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再確認の上、ご使用ください。



- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れなどを拭きとってください。その際、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。



電動機器の警告事項

— 本製品はAC100V電源を使用します —

警告



- ご使用後は必ず「切/入」ボタンを押して、すべてのマッサージを停止させてから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ご使用にならないときや、雷が鳴り出したときには、「切/入」ボタンを押して電源をOFFにしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 停電のときには直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは最後まで確実に差し込んでください。差し込まないと感電・ショート・発火の原因になります。



- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には設置しないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、製品の劣化も早めます。
- 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。故障や発火の原因になります。
- 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、お風呂場などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 本製品に脚を入れたままで、電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。



- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、絶対に濡れた手で触ったり、コードを引っ張ったりしないで、必ずプラグ部をつかんでコンセントから抜いてください。また、電源コードやプラグが傷んだり、差し込みがゆるんだ状態のままのご使用はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 製品を落下や冠水させて破損した場合は、絶対に使用しないで弊社カスタマーサービス課にご連絡ください。



- 本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。




- 本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、まず弊社カスタマーサービス課までご相談ください。(カバーの消耗・破損の場合も含む)
- 電源コードが破損した場合には、弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。弊社以外での修理は行わないでください。

- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社カスタマーサービス課(フリーダイヤル0120-30-4515)までご相談ください。
- 使用しても効果が現れないときは、医師または専門家にご相談ください。
- お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊社カスタマーサービス課までご相談ください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の指導に従って処分してください。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いいたします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

安全のため必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称

各部の名称

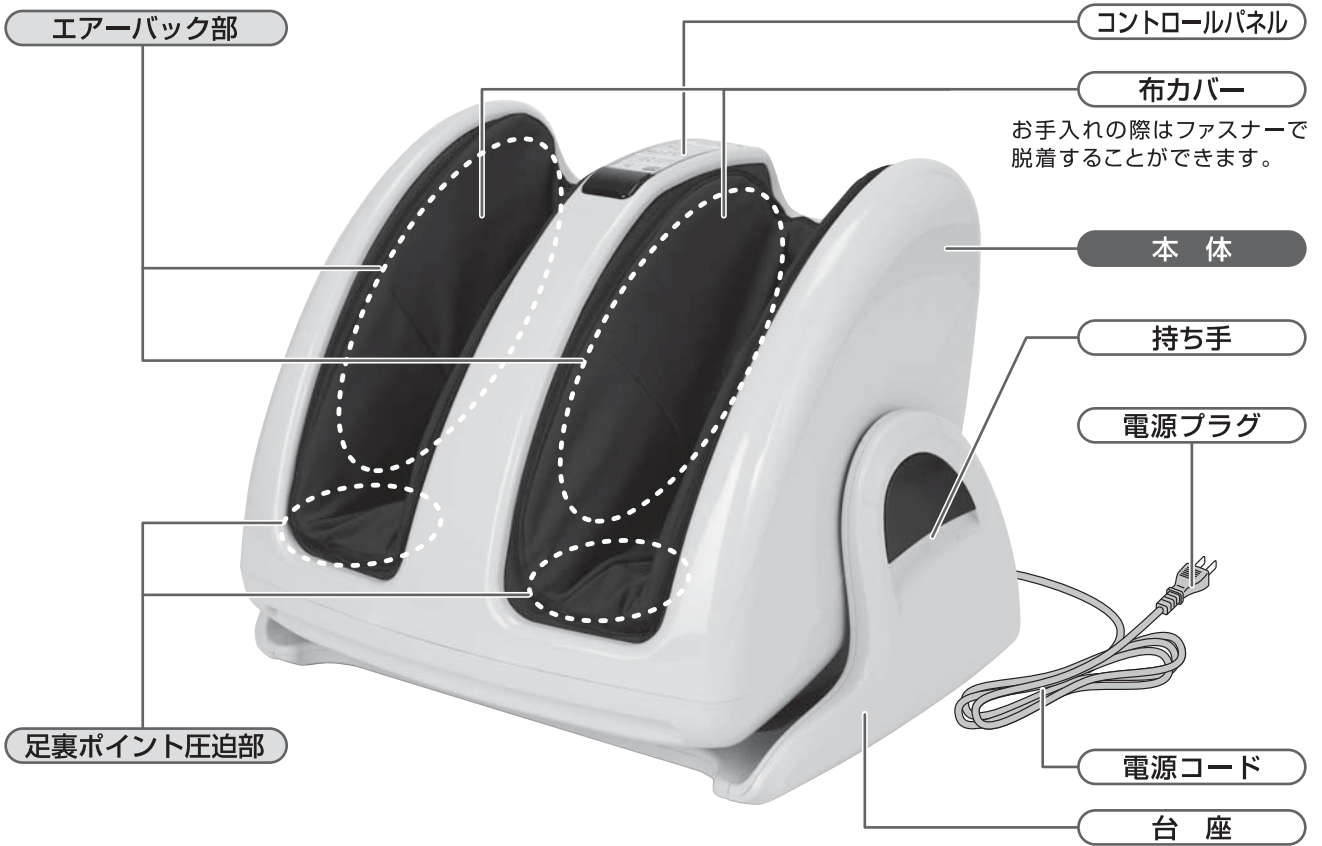

■ コントロールパネル ボタン名称



- 急停止ボタン**
緊急停止します。
- 切/入ボタン**
電源をON/OFFします。
- コースボタン**
【コースボタン】を押すと、あらかじめ内蔵されたプログラムが作動します。

しっかり	しっかりした開放と圧迫を繰り返し、脚・足裏をマッサージ。
やすらぎ	脚と足裏をやさしく低圧で包み込むマッサージコースです。
- 手動ボタン**
【手動ボタン】を押すと、「足裏」「ふくらはぎ」の2種類の手動コースが選べます。
- 強さボタン**
【強さボタン】を押すと、エアー強度を「つよい／ふつう／よわい」の3段階から選べます。
- 振動ボタン**
【振動ボタン】を押すと、振動マッサージが開始され、再び押すと振動マッサージが停止します。

※ 使用状態は、コントローラーの各項目のランプで確認できます。

使用方法

■ご使用の前に、必ず次の項目の確認をしてください。


1 電源プラグをコンセントに差し込み、【切/入ボタン】で電源をONにします

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. 【切/入ボタン】を押して、電源をONにしてください。

▲ 注意

- 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。

電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

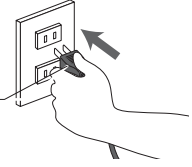

2 マッサージを開始します

■自動コースの場合

【しっかり】コースと【やすらぎ】コースの2種類からお好みのコースをお選びください。

- しっかり** しっかりした開放と圧迫を繰り返し、脚・足裏をマッサージ。
- やすらぎ** 脚と足裏をやさしく低圧で包み込むマッサージコースです。

1. 【コースボタン】を押して、「しっかりコース」もしくは、「やすらぎコース」の2種類からお好みのコースを選びます。

しっかり → やすらぎ → 切

2. 【強さボタン】を押すとよわい／ふつう／つよいの3段階から強度を調節できます。
3. 【切/入ボタン】を押すと、すべてのマッサージが停止し、電源が切れます。マッサージ終了後、電源プラグをコンセントから抜き取ってください。

- 動作開始から約15分で自動的に停止します。

■手動コースの場合

【足裏】コースと【ふくらはぎ】コースの2種類から選べます。

- 足裏** 足裏を中心にマッサージを行います。
- ふくらはぎ** ふくらはぎを中心にマッサージを行います。

1. 【手動ボタン】を押して、「足裏」もしくは、「ふくらはぎ」の2種類からお好みのコースを選びます。

足裏 → ふくらはぎ → 切

2. 【強さボタン】を押すとよわい／ふつう／つよいの3段階から強度を調節できます。
3. 【切/入ボタン】を押すと、すべてのマッサージが停止し、電源が切れます。マッサージ終了後、電源プラグをコンセントから抜き取ってください。

- 動作開始から約15分で自動的に停止します。

■振動マッサージを使用する場合

本製品は振動マッサージを行うことができます。

1. 【振動ボタン】を押すと振動マッサージが開始されます。再度、【振動ボタン】を押すと振動マッサージが停止します。

- 動作開始から約15分で自動的に停止します。



オートオフ機能について

開始後15分経過すると、自動的に動作を停止します。(LEDランプは全て消灯)

▲ 注意

- 開始後15分経過すると自動タイマーが作動し、自動的にマッサージが終了します。
- マッサージは15分以上しないでください。身体へ必要以上の刺激を与え、逆効果となるおそれがあります。
- 内部振動部の加熱などによって安全装置が働いた場合、1時間程度時間を置いて本体内部の温度を下げてから使用してください。

使用例 / 持ち運び方法

■使用例



本製品には、リクライニング機能が付いています。角度を調節することでイスに腰掛けた状態や座位の状態、また横になったリラックスした姿勢でマッサージが楽しめます。角度調節は無段階で調節できます。

【座位で使用する場合】



【イスを使って使用する場合】



【横になって使用する場合】



- ※リラックスした姿勢でお使いください。
- ※ご使用中は立たないでください。破損の原因になりますので、必ず腰掛けた状態でご使用ください。
- ※リクライニングするときは、必ず周囲に人やペットがいないこと、障害物がないか確認してください。
- ※キャスター付きのイスに座って使用しないでください。
- ※初めは「よわい」で使い、慣れてから「つよい」をお使いください。
- ※ご使用は1日15分以内にしてください。

▲ 注意

- 脚以外の部位へのマッサージには使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。
- 本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故のおそれがあります。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こすおそれがあります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。けがや事故のおそれがあります。
- カバーが外れたり、破れた状態では使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。
- 下からの突起物やエアに無理に抵抗するような使用方法はおやめください。
- 機器の上に立ったり、無理に体重をかけるご使用方法はおやめください。
- 直接骨部にあたる部分へは使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。

■持ち運び方法

本体を持ち運ぶときは、必ず持ち手を持ってください。守らないと落下による破損や事故やケガのおそれがあります。



使用上の注意

★痛みを我慢して続けるマッサージはお止めください。

- 人により必要なマッサージの時間・強度は異なります。
- 痛みを我慢して続けるマッサージは効果が無いばかりか筋肉痛や皮膚を痛めるなど逆効果にもなります。
- 痛みを少しでも感じた場合には、すぐに使用を中止してください。



▲ 注意

- 脚に装飾品など硬いものをつけた状態で使用しないでください。ケガや事故のおそれがあります。
- ふくらはぎ・足裏のマッサージ以外の目的では使用しないでください。また、直接骨部に当たる部位には使用しないでください。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はお止めください。事故を引き起こすおそれがあります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故のおそれがあります。

お手入れ方法など

■お手入れ方法 (本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れなどを拭き取ってください。)

- お手入れの前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長期にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れなどを拭き取ってください。また、汚れなどが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。このとき、シンナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れはお止めください。シミや変形の原因になります。

■保管および廃棄について

- お子様の手の届くところに置かないでください。
- 温度、湿度の高いところや、直射日光の当たるところに置かないでください。
- 廃棄は必ず各自治体の取り決めに従ってください。

■布カバーのお手入れ方法

布カバーが汚れた場合は、本体から取りはずし、ぬるま湯で洗濯してください。
※色落ちする場合がありますので、他の物との洗濯はおさげください。

【布カバーの取りはずし方】

1. 本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 布カバーのファスナーを完全にはずし、本体から取りはずしてください。

【布カバーの取り付け方】

1. 本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 布カバーのファスナーを本体のファスナー取り付け部に差し込み、ファスナーを最後まで閉めてください。

■布カバーが破れたり、傷んできた時

布カバーは消耗品です。布カバーが破れた時は、必ず弊社カスタマーサービス課にて専用布カバーをお求めください。(有償交換となります)専用布カバーのお求めは、弊社カスタマーサービス課(0120-30-4515)までお問い合わせください。



▲ 注意

- ※布カバーを取りはずした状態や破れた状態では使用しないでください。
- ※ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ※当社指定の布カバー以外は使用しないでください。

故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症状	チェック箇所
●動かない	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか? ○ 長時間の使用で本体が熱くなっていませんか? (1時間程度時間をおいて本体内部の温度を下げてから使用してください。)
●停止する	<ul style="list-style-type: none"> ○ 開始後15分経過していませんか? オートオフ機能が作動しています。

※確認後においても、異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず弊社カスタマーサービス課にご相談ください。

お問い合わせは カスタマーサービス課 ☎ 0120-30-4515 (AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~PM1:00及び土・日・祝祭日を除く)まで

使用上の注意 / お手入れ方法など / 故障かな?と思う前に

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生したときは保証規約により無償修理をいたします。

保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。
 - 取扱説明書記載以外の誤操作、取扱上の不注意
 - 天災、火災、地震などによる外部要因による故障及び損傷
 - 砂、泥、水かぶりなどが原因で生じた故障
 - お買い上げ後のお客様による輸送、移動、落下など
 - 保管上の不備
 - 弊社既定の修理取扱所以外で行われた修理などによる故障
 - 本製品本来の使用目的以外の使用
 - 業務用などの不特定多数による使用
 - 日本国外でのご使用の場合
 - 本保証書をご提示いただけない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

ご購入店名	①	おなまえ	
		おところ	〒
ご購入年月日		電話番号	() -

※お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理、その他のサービス等に利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江1-1-1

■製品仕様

管理医療機器

一般の名称：家庭用電気マッサージ器

販売名：モミつくすキュットラボ

認証番号：224AKBZX00092000

製造販売業者：アルインコ株式会社

住所：大阪府高槻市三島江1-1-1

生産国：中国

製品サイズ：W 565 × D 463 × H 455 (mm)

製品質量(重量)：約 13.0kg

定格電圧：AC100V(50/60Hz)

定格消費電力：30W

定格時間：15分

主な材質：本体／ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン
共重合合成樹脂)、生地／ポリエステル

修理・
アフターサービスの
ご案内

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

保証規約以外の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。詳しくは、弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

この商品の
WEBページはこちら



アルインコ株式会社

フィットネス事業部カスタマーサービス課

フリーダイヤル 0120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 但しPM12:00~PM1:00及び土・日・祝祭日を除く)

上記以外受付 FAX:072-678-6410 Email:fcs-syuuri@alincoco.jp

※故障や異常が発生した場合、まずは本書P6「故障かな?と思う前に」をご確認ください。